

Analizador de hemoglobina glicosilada POCT Quo-Lab



Equipo formato POCT para medición de HbA1c de forma rápida, precisa y segura, gracias a la metodología de afinidad al boronato. Resultados en 4 minutos con muestra de sangre total capilar o venosa.

El analizador de hemoglobina glicosilada Quo-Lab es un equipo POCT que permite una medición de HbA1c económica, precisa y confiable.

Únicamente requiere 4 µL de sangre total capilar o venosa que se recogen con un innovador colector de sangre que permite un muestreo sencillo y consistente. En 4 min obtendrá los resultados del análisis gracias a la metodología por afinidad al boronato no afectado por variantes de la hemoglobina.

Incluye lector de código de barras para el escaneo de los datos de calibración, ID del paciente y del operador.

Puede almacenar hasta 7000 resultados.

Uso sencillo en sólo 3 pasos


[caption id="attachment_12687" align="alignnone" width="300"]



Paso 1: Insertar el cartucho en el

analizador[/caption]

[caption id="attachment_12686" align="alignnone" width="300"]

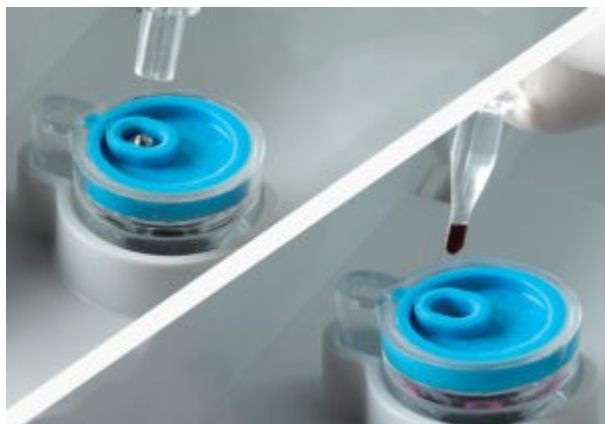

Paso 2: Inserte la herramienta de muestra y rompa el mango[/caption]

[caption id="attachment_12685" align="alignnone" width="300"]



Paso 3: Lea los resultados en 4 minutos[/caption]

Especificaciones Técnicas

Principio	afinidad al boronato
Muestra	sangre total capilar o venosa
Volumen muestra	4 μ L
Velocidad de prueba/ Tiempo de lectura	4 minutos
Intervalo de medición	4 – 15% A1c DCCT

Precisión	CV≤3% a 7% A1c
Conectividad	puerto USB
Peso	0.7 kg
Dimensiones	95*205*135 mm (L/An/Al)
Compatibilidad	LIS, HIS
Certificado	CE

[embed]<https://youtu.be/uHILKkdvT2Y>[/embed]

SKU: 3101-0011_VS

Categories: Hemoglobina y Hematocrito, POCT