

Coagulómetro POCT para hematología



Analizador de coagulación portable formato POCT para hematología. Diseño pequeño e intuitivo con múltiples pruebas combinadas de reactivos liofilizados que permiten un ahorro de costes. Perfecto para UCI, Urgencias hospitalarias, maternidad y pediatría, así como para otros departamentos de diagnóstico clínico.

Analizador de coagulación portable para hematología. Permite analizar los niveles de coagulación sanguínea de forma rápida, fácil y eficaz.

Utiliza el método de coagulación para evaluar el tiempo de protrombina (PT), el tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT), el tiempo de trombina (TT), el índice de fibrinógeno (FIB); además de uso de inmunoturbidimetría para la determinación clínica del índice D-Dímero

Diseño de prueba para una sola persona: reactivos liofilizados pre-empaquetados, múltiples pruebas combinadas de reactivos liofilizados que permiten un ahorro de costes.

Perfecto para uso en UCI, maternidad y pediatría, odontología, oftalmología, departamentos de diagnóstico clínico, ortopedia, primeros auxilios, especialidades y urgencias hospitalarias y/o ambulancias.

Características

- Muestreo de sangre entera
- Centrífuga interna
- Baja interferencia
- Visualiza los resultados. La curva de reacción y los resultados se muestran de forma intuitiva.
- Pequeño y portátil. Coagulómetro fácil de llevar y transportar, adecuado para múltiples escenarios.
- Múltiples metodologías: método de coagulación óptica, inmunoturbidimetría, ensayo de sustrato cromóforo.

Disponible

- Coagulation 4 panel: PT/APTT/TT/FIB
- Coagulation 5 panel: PT/APTT/TT/FIB/D-Dimer
- Próximamente: ATIII/FDP/ACT/Anti-Xa, etc.

[embed]<https://youtu.be/C2l64qm2JXA>[/embed]

Metodología

Fácil de utilizar en 4 sencillos pasos:

[caption id="attachment_12519" align="alignnone" width="300"]



Paso 1: Inserte el disco en el coagulómetro


POCT[/caption]

[caption id="attachment_12520" align="alignnone" width="300"]



Paso 2: Añada la muestra y diluya[/caption]

[caption id="attachment_12518" align="alignnone" width="300"]

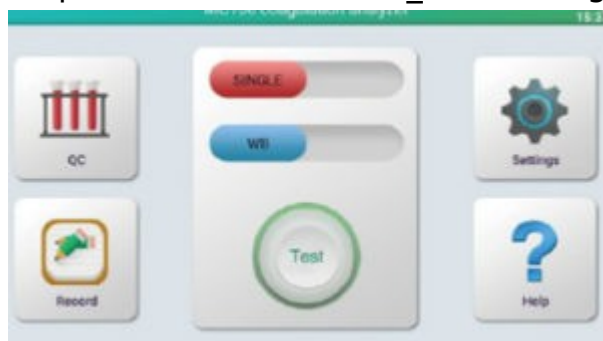

Paso 3: Haga clic en "inicio"[/caption]

[caption id="attachment_12517" align="alignnone" width="300"]



Paso 4: Lectura de Resultados[/caption]

Material necesario No suministrado

- Control coagulación Normal (Ref. 283810E50001). Caja 10 ud. (Consultar)
- Control coagulación patológico (Ref. 283810E50002). Caja: 10 ud. (Consultar)
- Paneles test coagulación (Consultar referencia según parámetros)

Especificaciones Técnicas

Elementos de prueba	PT, APTT, FIB, TT, DD, AT, FDP, ACT, Anti-Xa, etc.
Muestra	sangre entera, plasma
Tipo de reactivo	reactivos liofilizados
Tamaño de la muestra	180 µL

Tiempo de prueba	≤12 minutos
Código de identificación	Reconocimiento automático del código QR del disco reactivo
Impresora	Impresora térmica integrada o impresora externa (con controlador de impresora inalámbrica)
Sistema operativo	Android 5 pulgadas (versión 5.1), resolución 720 × 1280, compatible con sistema LIS/HIS
Tamaño	270 mm * 180 mm * 155 mm
Peso	≤3kg

SKU: 683831E10004

Categories: Coagulómetros, POCT