

Centrífuga Angular Analógica AK50

Modelo. AK50
Ref. Akralab 66553100AK50



Centrífuga analógica de acero pintado al horno con tapa de metacrilato abatible y dispositivo de seguridad de apertura manual para abrir la tapa en caso de fallo eléctrico. Están equipadas con interruptor de encendido y testigo luminoso, regulación de velocidad por posiciones y temporizador regulable hasta 30 minutos para desconexión automática y conexión continua.

Características

- Cabezal angular y control analógico de parámetros.
- Carcasa de acero pintada al horno.
- Tapa abatible con sistema de seguridad de apertura.
- Sistema de apertura manual de la tapa en caso de fallo eléctrico.
- Regulación de velocidad por posiciones.
- Suministrada con tapones de silicona de serie para adaptar tubos más pequeños. Opcional se puede añadir adaptadores estándar para tubos (Consultar).

Especificaciones técnicas

Modelo	AK50
Velocidad Máxima	4000 r/min (rango 500)
RCF Máxima	1950 gr
Capacidad del Rotor	15 ml x 12
Altura Máxima para uso	115 mm tubo
Configuración de hora	1-60 min
Precisión de velocidad	±50 r/min
Ruido (máx. velocidad)	≤60 dB 220V
Voltaje	50-60 Hz
Potencia	40W
Peso neto	12 Kg.

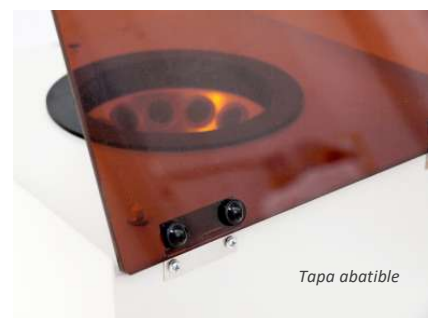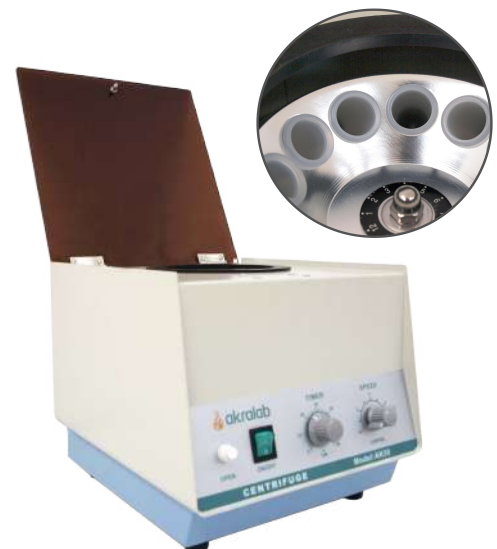

Sistema de apertura manual de la tapa en caso de fallo eléctrico.