




SecuTag
specimen safe transport



Solución integral
para transporte y gestión
de muestras sanitarias

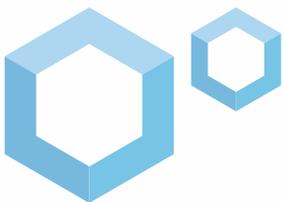

Un producto
akralab
one point, all solutions.

SecuTag es una **solución integral para el transporte de especímenes** entre centros de atención primaria (CAPs) y hospitales, **de forma segura**

Qué incluye

- ✓ 1 Tag por nevera
- ✓ 1 Antena
- ✓ 1 Receptor
- ✓ 1 Licencia de Software de Gestión

Opciones:

- Nevera para transporte
- Servicio de mantenimiento del Software

Ventajas

- **Escalable:** Se pueden ampliar el número de CAPs, neveras y hospitales.
- **Configurable:** El modo de trabajo puede ser con auto-expedición, o usando antena y receptor en cada CAP.
- **Personalizable:** los intervalos de toma de temperatura se pueden configurar a medida.

Características

- **Trazabilidad:** El Tag detecta temperatura y tiempos durante el transporte, y las antenas vuelcan los datos a un software centralizado de manera automática y desatendida.
- **Mejora Continua:** Permite identificar los CAP que repiten incidencias o los itinerarios más problemáticos, para establecer planes de mejora.
- **Seguridad del paciente:** Permite validar expediciones con integridad dudosa antes de ser incorporados a la analítica del Hospital.



Tag Rfid
radiofrecuencia



Nevera con Tag
de seguimiento

Software de
control y gestión



Antena

Receptor




Preguntas frecuentes

- **Vida Media del Tag:** la durabilidad de cada tag depende del intervalo de toma de datos, que recomendamos no sea inferior a 1 minuto
- **Cómo se identifican el CAP y a las neveras:** cada Tag tiene un identificador único que lo asocia a una nevera y a un centro de expedición o CAP.
- **Dónde se instala el software:** la aplicación se puede instalar en nuestro servidor o en el del hospital, con acceso por internet a los CAPs.



SecuTag
specimen safe transport

Cómo funciona

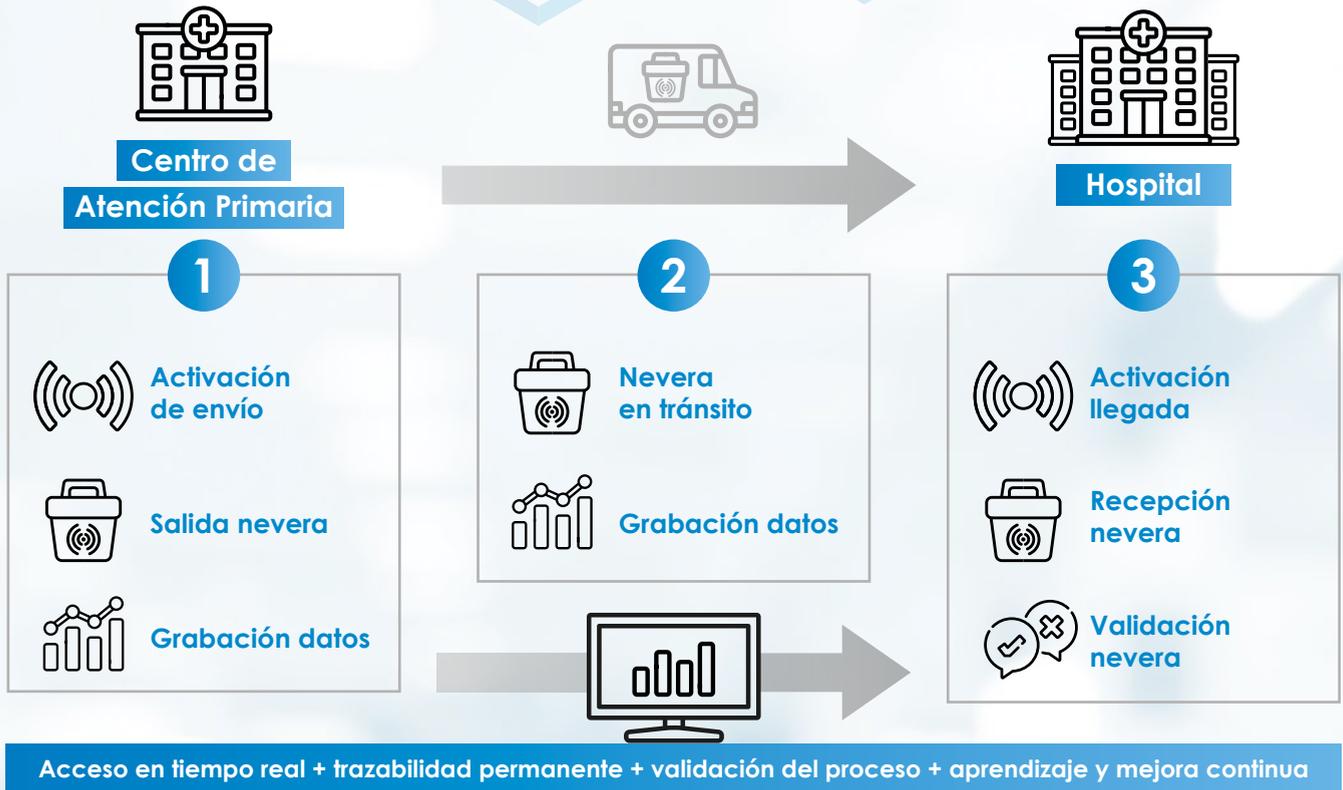

Solicita más información

Pol. Ind. Atalayas Avda. de la Antigua Peseta, 77
03144 Alicante

Telf. 902 22 22 75 | +34 965 11 65 21

Fax. 902 15 41 65 | +34 965 11 57 62

atencion.clientes@akralab.es

www.akralab.es

Un producto



akralab

one point, all solutions.